



賽馬會a家

Jockey Club | age at home

樂齡科技教育及租賃服務中心
Geronteck Education and Rental Service Centre

特別功能輪椅




01 器材介紹



- ✓ 此輪椅具有自助或助推式功能
- ✓ 調校手柄至合適位置，便可作輪椅或步行車使用
- ✓ 手柄具剎車功能，讓照顧者推輪椅落斜時作減速之用
- ✓ 坐墊採用防滑海綿，加上前高後低的設計，可防止臀部向前滑動
- ✓ 椅背設有背袋，方便存放物件

02 使用方法

鎖車掣

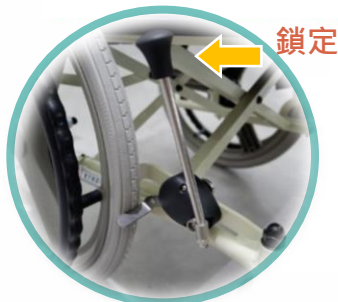

如需鎖定輪椅，請把鎖車掣向前推直至鎖緊車輪，令車輪不能再轉動。



如需解鎖，請把鎖車掣向後拉至完全離開車輪，便能解鎖。

打開輪椅



利用鎖車掣鎖定輪椅，然後站在輪椅的側面或後方，按住座面左右兩側向下推，直至坐椅下的支架緊貼車架上。



放置坐墊時，請確保坐墊方向前高後低。



然後將坐墊底部的兩條魔術貼，對準輪椅座面上的兩條魔術貼，並貼至穩固便可。

作輪椅使用:

手柄角度的調節方法



把手柄由最下
向上拉至大約
在椅背後25度。



聽到「咔」一
聲代表手柄已
鎖實，可供安
全使用。

剎車掣使用方法



用力握著手剎
掣則可剎車，
鬆手則可解除
剎車。



如行車中需減
慢車速時，必
須同時向兩邊
的手剎掣施力
，慢慢減速。

剎車是為了減慢車
速，記住不等於鎖
車！



安全帶的使用方法



坐上輪椅後，
必須繫上安全
帶。

安全帶應緊貼
身體，大約留
有一個手掌的
空間便可。



注意：
安全帶上的魔術貼
必須貼妥，並需要
重疊10cm或以
上。

未繫上的安全帶有
可能被捲進車轆而
引致意外！

腳踏的使用方法




使用者坐上輪
椅後，把一邊
腳踏板放下，
然後使用者先
把一隻腳放上。



放下另一邊的
腳踏板，把另
一隻腳放上。

折疊輪椅步驟

1

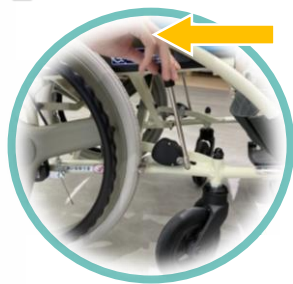

先用鎖車掣鎖緊輪椅。

2



然後把兩個腳踏板收起。

3



把海綿坐墊一端沿魔术貼向上拉起，拆走海綿坐墊。

4



一手按下手柄上凸出的黑色按鈕。

5



另一手同時把手柄向後拉至最盡。

6



雙手同時拉起座面前、後方的中央位置，再把兩邊扶手拍至最近，便能完成摺疊。

7

注意!



在折疊前，左右手柄需調校至前後不一的狀態，令其在收起過程中不會互相碰撞。

8



完成!



03 注意事項

1. 打開和折疊前，請確保已把鎖車掣鎖上。
2. 請小心留意手部位置，避免夾傷。
3. 請勿握住左右兩邊手柄借力打開摺合輪椅，這樣有機會令車架受損。

作步行車使用:

**** 作步行車使用前，必須經職業治療師評估後才能使用 ****



一手把手柄上凸出的黑色按鈕按下。

另一手握實手剎掣，同時把手柄向前推至大約在椅背前25度。



聽到「咔」一聲代表手柄已鎖實，可供安全使用。

注意:

1. 落斜路時，請勿將輪椅轉作步行車使用，以免發生危險。
2. 轉用步行車時，需把安全帶貼妥並放好在坐墊上，以免被捲進車輪引致意外。
3. 使用時，雙手必須握緊手柄。

****實際使用方法需要按照個別使用者的活動能力，使用者請勿自行改動特別功能輪椅，如有疑問，請向中心職員查詢****

04 服務查詢

賽馬會a家樂齡科技教育及租賃服務中心

☎ 3153 5252

☎ 3153 5250

🏠 新界沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場閣樓2號鋪

